

CONSEILS D'UTILISATION

eS-KAP-Ad est livré avec :

- Son câble USB
- Son capot
- Sa batterie
- Son stylet
- Cette notice rapide

Fonctionnement d'eS-KAP-Ad :

- Cette notice décrit l'installation du lecteur. Pour son paramétrage dans le logiciel métier, demander conseil à votre éditeur.
- La notice détaillée est disponible sur www.kapelse.com ou chez votre éditeur.
- N'insérer que des cartes à puce dans les interfaces cartes.
- Utiliser spécifiquement le câble de eS-KAP-Ad fourni dans son emballage.

Pour l'entretien d'eS-KAP-Ad :


- Utiliser un chiffon doux et sec pour le nettoyage du lecteur. N'utiliser aucun produit de nettoyage.
- Ne pas utiliser l'écran tactile avec un objet pointu.

MADE IN FRANCE   

INSTALLATION

Pour la mise en marche d'eS-KAP-Ad, il faut :

1- Insérer la batterie comme indiqué ci-dessous : le logo de la batterie doit apparaître inversé par rapport au logo du lecteur :

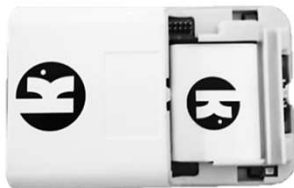

2- Insérer complètement la carte C.P.S. (Carte de Professionnel de Santé) au dos du lecteur. Le dos de la carte est orienté vers le dos du lecteur :



3- Refermer le capot en le faisant glisser de bas en haut :



4- Insérer le stylet dans son emplacement, au bas du capot*.

5- Connecter eS-KAP-Ad au poste de travail à l'aide du câble USB fourni pour :


- charger la batterie
- installer le pilote (cf. **INITIALISATION**) sur le poste de travail
- identifier le lecteur avec le logiciel métier (cf. notice logiciel).

(*): il est nécessaire de retirer le stylet pour pouvoir ouvrir ou fermer le capot.

1- Installation du pilote d'eS-KAP-Ad :

Le pilote d'**eS-KAP-Ad** est disponible sur Windows Update ou depuis le lecteur **eS-KAP-Ad** lui-même. Pour l'installer à partir du lecteur connecté : appuyer sur la touche  puis **LINK** et **INSTALLATION PILOTE** et suivre les instructions sur le PC.

2- Réglages d' eS-KAP-Ad :

- L'ensemble des réglages et paramètres est accessible par l'appui sur la touche  affichée dans le bandeau au bas de l'écran. Le détail des fonctionnalités est disponible dans la notice détaillée.

GÉNÉRALITÉS

eS-KAP-Ad, dans sa version Pro, est une solution intégrant les fonctionnalités d'un T.L.A. complet. Il permet la signature partielle ou totale des feuilles de soins créées sur le lecteur (actes isolés) comme sur le poste de travail (actes en série), au cabinet comme en déplacement. Il permet aussi l'enregistrement des données de la carte Vitale en déplacement. Les données acquises en déplacement peuvent être, ensuite, déchargées dans le poste de travail, de retour au cabinet.

EN MODE DÉCONNECTÉ

En mode déconnecté, saisir l'entête FSE et vérifier qu'**eS-KAP-Ad** est identifié par le logiciel*. Le menu suivant permet d'accéder aux données stockées dans le lecteur.



En mode déconnecté, **eS-KAP-Ad** passe automatiquement en mode veille. Il sort de veille par l'insertion d'une carte, un appui court sur le bouton latéral ou une connexion au poste de travail. Appuyer sur la touche « **Déverrouiller** » si nécessaire.

eS-KAP-Ad s'éteint automatiquement au bout de 3 heures d'inactivité. Un appui long sur le bouton latéral permet de le rallumer. Appuyer ensuite sur la touche « **Déverrouiller** ».

Pour éteindre ou mettre en veille **eS-KAP-Ad** de manière volontaire, faire un appui long sur le bouton latéral et sélectionner votre choix dans l'écran ci-contre :

